

Zusatzblatt zur Gebrauchsanweisung

Warnung:

Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch dieser Maske, ob diese für Ihren Verwendungszweck geeignet ist. Diese Maske darf nicht bei Beschädigungen an der Maske selbst oder an der Verpackung verwendet werden.

Sollten Sie keine zufrieden stellende Passform erzielen, betreten Sie niemals damit kontaminierte Bereiche! Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder einen Fachmann in der Nähe.

Die Markierung „NR“ bedeutet „Non Reusable“ und besagt, dass die Maske nur für maximal eine Arbeitsschicht (8 Stunden) verwendet werden darf und danach fachgerecht entsorgt werden muss. Sie ist nicht wieder verwendbar.

Atemschutz der Klasse FFP2 eignen sich für Arbeitsumgebungen, in denen sich gesundheitsschädliche Stoffe in der Atemluft befinden. Sie müssen mindestens 94 % der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,6 µm auffangen und dürfen eingesetzt werden, wenn der Arbeitsgrenzwert höchstens die 10-fache Konzentration erreicht.

Diese Maske liefert keinen Sauerstoff und darf nicht in atmosphärischen Umgebungen mit weniger als 19,5 % Sauerstoff verwendet werden. Verwenden Sie diese Maske nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Verwenden Sie diese Maske nicht mit Bärten oder anderen Gesichtshaaren, die den Kontakt zwischen dem Gesicht und dem Rand der Maske behindern könnten. Die Maske nur mit gesunder Haut tragen.

Supplementary sheet to the user manual

Warning:

Please check before using this mask whether it is suitable for your purpose. This mask must not be used in case of damage to the mask itself or to the packaging.

If you do not achieve a satisfactory fit, never enter contaminated areas! Contact your supervisor or a specialist nearby.

The marking „NR“ means „Non Reusable“ and states that the mask may only be used for a maximum of one work shift (8 hours) and must then be disposed of professionally. It is not reusable.

Class FFP2 respirators are suitable for working environments in which harmful substances are present in the breathing air. They must capture at least 94 % of the particles in the air up to a size of 0.6 µm and may be used if the working limit value does not exceed 10 times the concentration.

This mask does not provide oxygen and must not be used in atmospheric environments with less than 19.5 % oxygen. Do not use this mask in hazardous areas.

Do not use this mask with beards or other facial hair that could impede contact between the face and the edge of the mask. Only use the mask with healthy skin.

FFP2 NR Atemschutzmaske / Medizinische Gesichtsmaske
 Filtrierende Halbmaske zum Schutz gegen Aerosole und Partikel und zur Verwendung im Infektionsschutz



TechMed Mask Art. 90101

FFP2 NR EN 149:2001+A1:2009 CE 0197

Typ IIR DIN/EN 14683:2019-10 CE



Produktmaße gefaltet 16 x 10,5 cm – trocken lagern

Gebrauchsanleitung



1. Reinigen und desinfizieren Sie vor dem Anlegen der Maske gründlich Ihre Hände. Nehmen Sie die Atemschutzmaske aus der Verpackung und ziehen Sie diese vorsichtig an den Bändern auseinander, um die Maske zu entfalten. Prüfen Sie die Unversehrtheit der Maske.



2. Halten Sie die Maske vor Ihr Gesicht mit der Innenfläche nach oben und legen Sie jeweils rechts und links ein Band um ein Ohr.



3. Drücken Sie mit den Fingern auf den Formbügel und passen ihn der Nase an, damit die Maske eng anliegt.



4. Mit Hilfe der beiliegenden Clips kann die Länge des Ohrgummis hinter dem Kopf angepasst werden.



5. Ziehen Sie die Maske nach unten über Mund und Kinn. Atmen Sie tief ein. Die Maske muss Nase, Mund und Kinn vollständig bedecken und dicht anliegen. Sofern die Maske richtig sitzt, bewegt sich das Filtermaterial beim Einatmen.



6. Vermeiden Sie es, die Maske vorne zu berühren. Fassen Sie diese nur an den Bändern an. Im Fall von Nässe und Feuchtigkeit bitte eine neue Maske anlegen.



7. Die empfohlene Tragezeit der Maske beträgt eine Schicht (ca. 8 Stunden). Werfen Sie die Maske nach Gebrauch in den Mülleimer. Waschen und desinfizieren Sie anschließend wieder Ihre Hände.

Hersteller



LT technologies GmbH & Co. KG | Langes Gewand 7
 78604 Rietheim-Weilheim | Germany
 Fon: +49 (0)7461 9 66 20 - 0
 info@lt-technologies.de | www.lt-technologies.de



FFP2 NR Respirator mask / Medical face mask

Filtering half-mask for protection against aerosols and particles and for use in infection control



TechMed Mask Art. 90101

FFP2 NR EN 149:2001+A1:2009 CE 0197

Typ IIR DIN/EN 14683:2019-10 CE



Product size folded 16 x 10,5 cm – store dry

Instructions for use



1. Thoroughly clean and disinfect your hands before applying the mask. Remove the mask from its packaging and gently pull the straps apart to unfold the mask. Check the mask for defects or damage.



5. Pull the mask down over mouth and chin. Take a deep breath. The mask must cover the nose, mouth and chin completely and fit snugly. If the mask fits correctly, the filter material will move when you breathe in.



2. Hold the mask in front of your face with the inner surface facing upwards and place a ribbon around one ear at the right and left side.




6. Avoid touching the front of the mask. Only touch it by the straps. In case of wetness and moisture, please put on a new mask.



3. Press with your fingers on the moulded frame and adjust it to the nose so that the mask fits tightly.



7. The recommended wearing time of the mask is one shift (approx. 8 hours). Throw the mask in the bin after use. Then wash and disinfect your hands again.

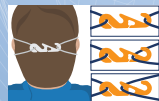

4. The length of the ear loops can be adjusted behind the head using the clips provided.

Symbol	Beschreibung	Description
	Symbol für „CE Kennzeichnung der Konformität“	Symbol for „CE Marking of conformity“
	Symbol für „Unsteril“	Symbol for „Unsterile“
	Symbol für „Nicht wiederverwenden“	Symbol for „Do not reuse“
	Symbol für „Trocken aufbewahren“	Symbol for „Keep store“
	Symbol für „Temperatur Limit“	Symbol for „Temperature Limit“
	Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“	Symbol for „Follow user manual“
	Symbol für „Nicht als Lebensmittel geeignet“	Symbol for „Not suitable for use as food“
	Symbol für „Haltbar bis“	Symbol for „Durable until “
	Symbol für „Hersteller“	Symbol for „Manufacturer“
	Symbol für „Herstellungsdatum“	Symbol for „Date of manufacture“
	Symbol für „LOT/Charge“	Symbol for „LOT/Charge“

Manufacturer

LT TECHNOLOGIES
service is not just an idea!



LT technologies GmbH & Co. KG | Langes Gewand 7
78604 Rietheim-Weilheim | Germany
Fon: +49 (0)7461 9 66 20 - 0
info@lt-technologies.de | www.lt-technologies.de



Die EU-Konformitätserklärung ist auf der Webseite www.lt-technologies.de einzusehen und abrufbar.

The EU declaration of conformity on the website www.lt-technologies.de can be viewed and is available.

2022-08

2024-08